

ВИБРОПРИВОДЫ ДЛЯ СИТ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОПРИВОД ДЛЯ СИТ

СТАНДАРТЫ: EN 932-5 | ISO 3310-1

Виброприводы активируются электромагнитными импульсами и, благодаря тройному вибрационному действию (вертикальному, боковому и вращательному) рекомендуются для рассевов, где важны высокая точность и эффективность и требуется постоянное и интенсивное использование оборудования. Применимы также для отсева мелкозернистых материалов.

Электромагнитный вибропривод прост в использовании, имеет прочную конструкцию. Можно устанавливать до 10 сит и использовать для мокрого отсева (см. принадлежности A046, A047).

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 450/750Вт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тройное вибрационное действие:

- Вертикальное
- Боковое
- Вращательное

На выносной панели задаются:

- Время отсева 0-999 минут
- Интенсивность вибрации
- Непрерывное или прерывистое вибрирующее действие
- Паузы между циклами вибрации (актуально для мелкозернистых материалов)
- Панель управления может быть закреплена на стене или установлен на скамейке



A059-01 KIT



A059-02 KIT

Модель	Диаметр сит, Ø	Размеры (ДШВ), мм	Масса, кг
A059-01 KIT	200 мм - 8"	320x380x850	40
A059-02 KIT	200 - 250 - 300 - 315 мм - 8" - 12"	380x440x1080	65
A059-03 KIT	200 - 250 - 300 - 315 - 350 - 400 мм - 8" - 12"	430x460x1150	80
A059-04 KIT	200 - 250 - 300 - 315 - 400 - 450 мм - 8" - 12" - 18"	480x500x1150	85



A059-03 KIT



A059-04 KIT

A058 ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ ШКАФ

Для виброприводов серии A059 и A060-01. Имеет звукопоглощающее покрытие в соответствии с директивой безопасности ЕС.



A058 + A059-03 KIT



A059-21

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

A059-21

ЗАЖИМ быстросъемный к устройству крепления сит. Эффективен для быстрого вертикального смещения балки. (Не используется с мод. A059-01 KIT)
Упаковка: 2 штуки со штангами.



A059-21

A061N ВИБРОПРИВОД С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

СТАНДАРТЫ: EN 932-5 | ISO 3310-1

Разработан для рассева больших количеств материалов. Объем пробы до 30 литров (60 ÷ 70 кг). Машина прочной конструкции вмещает 6 сит и поддон.

Поставляется в комплекте с поддоном, но без сит, которые заказываются отдельно.

В страны ЕС поставляется только с защитным кожухом или шкафом (см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 750 Вт

Габариты: 585x790x850 мм

Масса: 180 кг



A061N + A061-98



A061N + A061-97



A061N
с ситами

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

A061-97

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, с верхней крышкой и дверью, по нормам безопасности ЕС.

Оборудован микровыключателем, который отключает электропитание установки при открытии двери.

Также защищает от пыли во время работы.

A061-98

СТАЛЬНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ШКАФ с микровыключателем в соответствии с директивой безопасности ЕС, облицованный звукоизолирующим материалом для снижения шума. При открытии двери автоматически отключается электропитание.

Также защищает от пыли во время работы.

Габариты (ДШВ): 920x1000x1400 мм

A061-03

РАМА БЕЗ СЕТКИ, размеры 457x660x75 мм, для сеток с размером ячеек от 125 до 6,3 мм.

A061-05

РАМА без сетки, размеры 457x660x75 мм, для сеток с размером ячеек от 5,6 до 1 мм.

A061-06

РАМА без сетки, размеры 457x660x75 мм, для сеток с размером ячеек от 0,850 до 0,063 мм.

A060-01 МОТОРИЗОВАННЫЙ ВИБРОПРИВОД

Можно устанавливать сита Ø200, 250, 300, 315 мм и 8"...12".

Этот простой и недорогой вибропривод приводится в действие электродвигателем. Можно устанавливать до 8 сит Ø 200 мм или 7 сит Ø 300 мм с крышкой и поддоном. Также может использоваться для мокрого отсева (см. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ мод. A046 и A047). Таймер 0 - 60 мин.

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 110Вт

Габариты: 350x400x950 мм

Масса: 24 кг

МИКРОСФЕРЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

Модель	Диапазон Ø микросфер для калибровки, мм
A060-31	0.000 ... 0.050
A060-32	0.040 ... 0.070
A060-33	0.070 ... 0.110
A060-34	0.090 ... 0.150
A060-35	0.100 ... 0.200
A060-36	0.150 ... 0.250
A060-37	0.200 ... 0.300
A060-38	0.250 ... 0.500
A060-39	0.400 ... 0.600
A060-40	0.500 ... 0.750

Модель	Диапазон Ø микросфер для калибровки, мм
A060-41	0.750 ... 1.000
A060-42	1.000 ... 1.250
A060-43	1.250 ... 1.550
A060-44	1.550 ... 1.850
A060-45	1.700 ... 2.000
A060-46	2.000 ... 2.400
A060-48	2.400 ... 2.900
A060-49	2.850 ... 3.300
A060-50	3.300 ... 3.600

 **Примечание:** Для калибровки сит с размером ячеек более 4 мм можно использовать высокоточный штангенциркуль.

A058-01 РУЧНОЙ ВИБРОПРИВОД ДЛЯ СИТ Ø 200 ММ И 8"

Разработан для полевых условий и мобильных лабораторий, где нет электроснабжения. Вибрация создается вращением ручки.

Одновременно вмещает до 6 сит Ø 200 мм или 8" с крышкой и поддоном.

Габариты: 300x450x600 мм

Масса: 16 кг




A058-01

СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОСФЕРЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ СИТ С СЕРТИФИКАТОМ NIST

Калибровка или проверка износа сетки может быть проведена с использованием стеклянных микросфер.

Поставляются с сертификатом соответствия NIST (Национального института стандартов и технологий). Упаковка 5 флаконов.

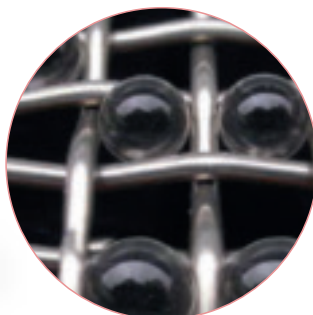

A057-31... A057-44



A060-01

Модель	Размер ячейки µм	Масса в упаковке, г
A057-31	45	1
A057-32	63	1
A057-33	75	1
A057-34	90	1
A057-45	106	1
A057-35	125	1
A057-36	150	1.5
A057-37	250	2.5
A057-38	300	2.5
A057-39	425	2.5
A057-40	500	2.5
A057-41	600	2.5
A057-42	1000	7
A057-43	1180	10
A057-46	1600/1700	20
A057-44	2000	20

Сферы других размеров поставляются по запросу.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru